


VTT STANDARD TYPE 標準タイプ

シンプルなブロック形状です。電気メス等のエネルギーデバイスを使った切開や縫合・結紮を合わせたトレーニングに御使用ください。デモや機器の評価にも手軽に御使用頂けます。VTTは植物性食品から作られた手術トレーニング用模擬臓器です。

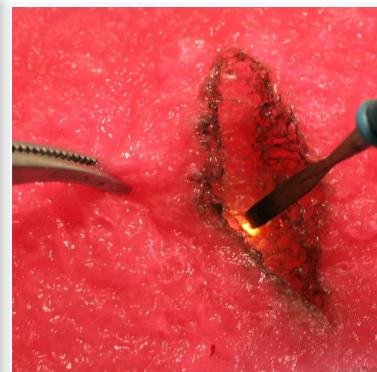

VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存（出荷後2ヶ月以上）が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-STD

税別定価 ¥2,500



JAN 4562480975019

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研

VTT TUMOR-IN TYPE 腫瘍埋め込みタイプ

軟質のブロック内に擬似腫瘍（やや硬め、直径10～15mm）が2個埋め込まれています。電気メス等で摘出（核出）して死腔を残さない縫合まで一連のトレーニングに御使用頂けます。乳腺腫瘍の核出、肝臓など実質臓器の腫瘍核出、切除などもイメージ可能です。

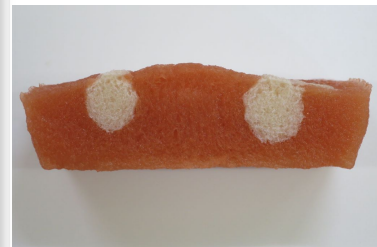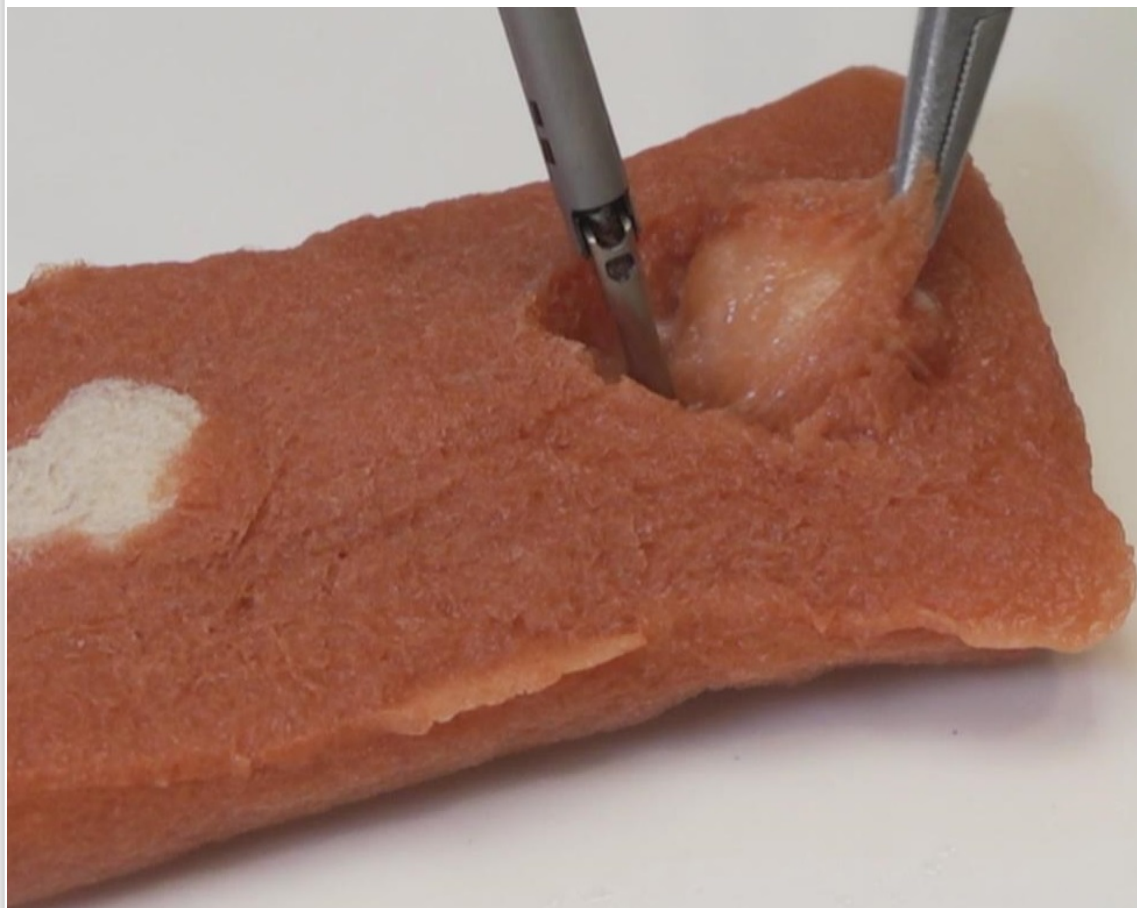

VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存（出荷後2ヶ月以上）が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-TMI

税別定価 ¥ 3,500


JAN 4562480975026

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研

VTT DOUBLE LAYER TYPE 二層タイプ

硬めの上層と柔らかめの下層に分かれており、電気メス等のエネルギーデバイスを使用した切開や剥離のトレーニングに御利用頂けます。縫合も可能です。

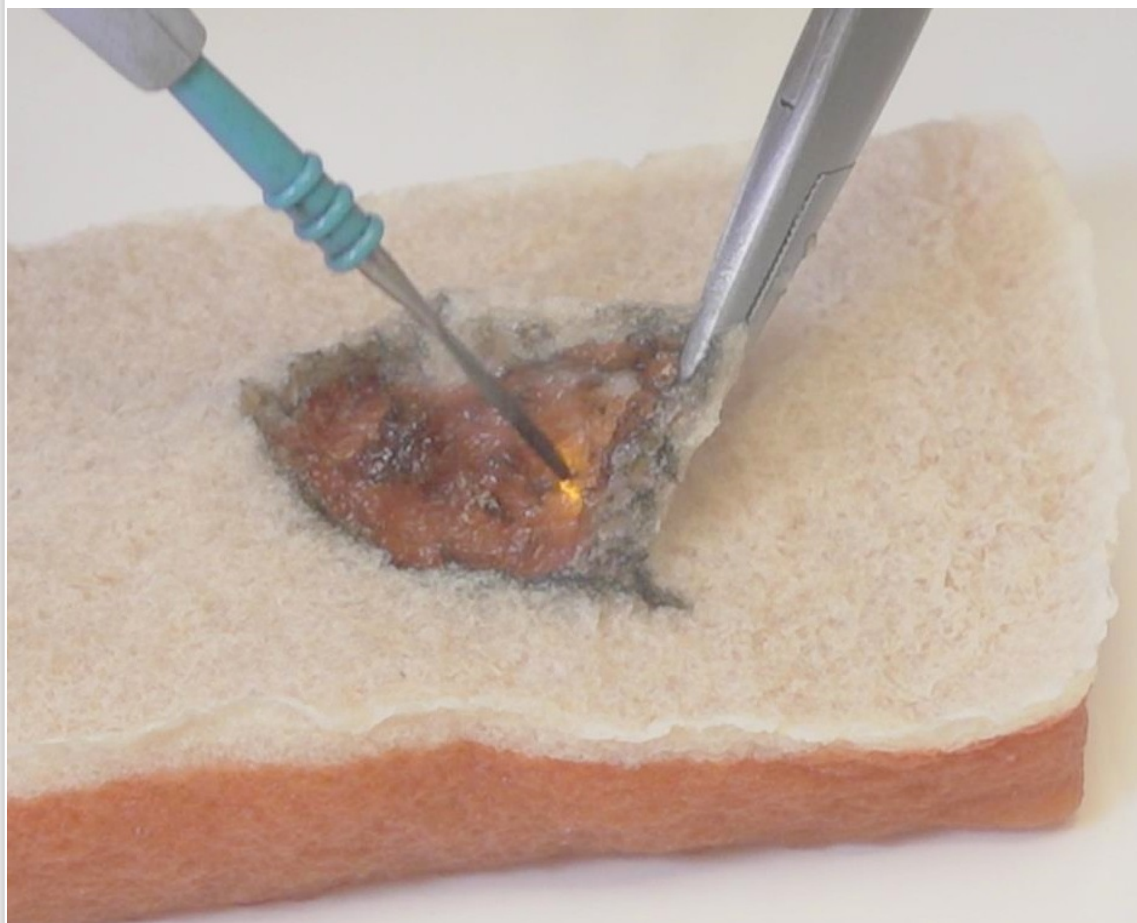

VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存（出荷後2ヶ月以上）が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-DBL

税別定価 ¥ 3,500

JAN 4562480975002

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>


株式会社寿技研

VTT VESSEL-IN TYPE 血管埋め込みタイプ

軟質のブロック内に擬似血管として棒状の組織(硬め、直径5mm程度、中実)が2本埋め込まれています。

鈍的剥離やエネルギーデバイス等を使って摘出のトレーニングが可能です。

(擬似血管は中空構造ではありません。)

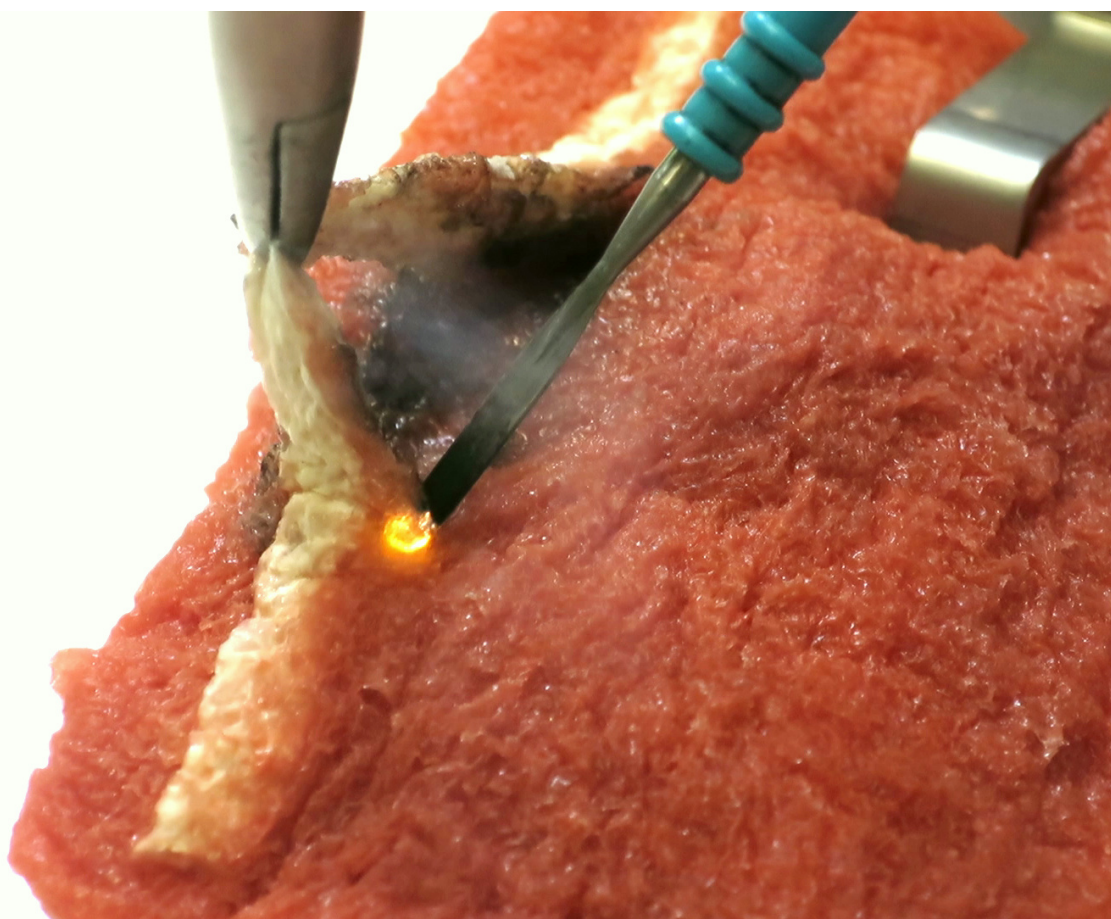

VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存(出荷後2ヶ月以上)が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-VSI

税別定価 ¥ 3,500



JAN 4562480975033

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研

VTT COMPOSITE TYPE 複合タイプ

内部に15mm程度の球状の擬似腫瘍を埋め込み、表層は3mm程度の白い層で覆っています。電気メス等を使って、表層を切開、内部の擬似腫瘍を摘出し、腔と表層を縫合するまでのシミュレーションが可能です。

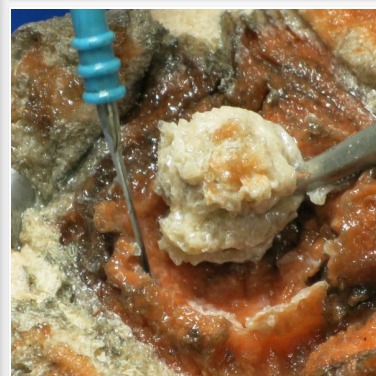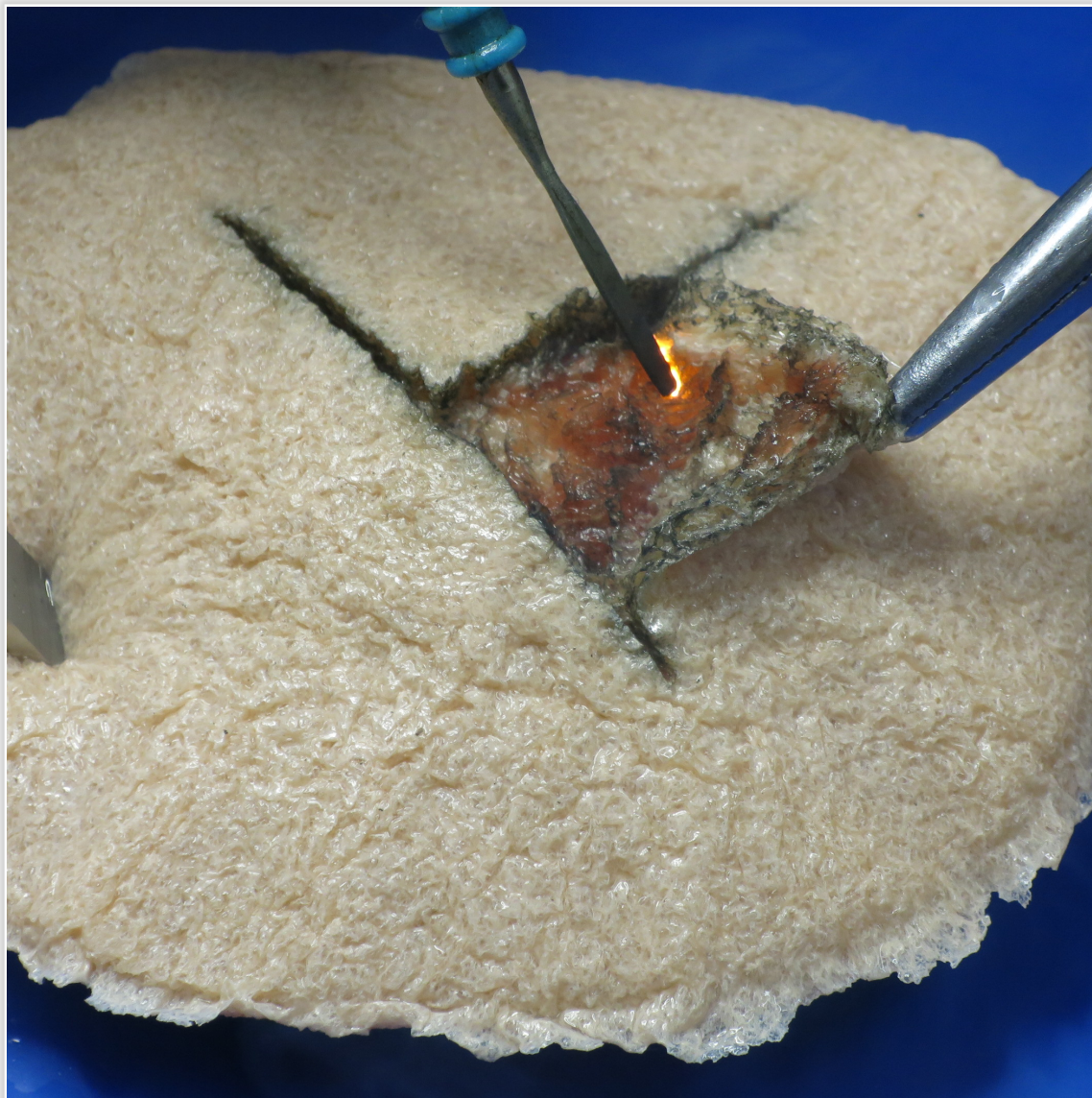

VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存（出荷後2ヶ月以上）が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-CMP

税別定価 ¥4,000

JAN 4562480975040

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研